

АППАРАТ ФИЗИОЛОГИЧНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

сухое вытяжение




- Вытяжение осуществляется на наклонной плоскости под действием собственного веса тела пациента — аутогравитационное вытяжение.
- Сила вытяжения регулируется за счет изменения угла наклона кушетки и уровня высоты подколеника.
- Одновременно с процедурой вытяжения проводится механический роликовый массаж с подогревом и вибрацией, что дополнительно расслабляет мышцы и создает ощущение комфорта.
- Обеспечивается разгрузка позвоночника, восстанавливаются его анатомо-физиологические функции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- «ОРМЕД-профилактик» позволяет упростить процедуру вытяжения и добиться максимального эффекта и лечения заболеваний позвоночника при минимальных затратах.
- Вытяжение под действием веса тела сводит возможность осложнений во время и после процедуры к нулю.
- Процедуры на аппарате не требуют специальной подготовки персонала и постоянного присутствия врача.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение питающей сети при частоте 50 Гц, В.... 220±10%
2. Максимальная потребляемая мощность, Вт 180
3. Массируемая линейная зона позвоночника, мм..... 710
4. Максимальный угол наклона корпуса, град.....19
5. Габаритные размеры аппарата (д.ш.в.), мм.....2035x670x600
6. Масса аппарата, кг..... 65

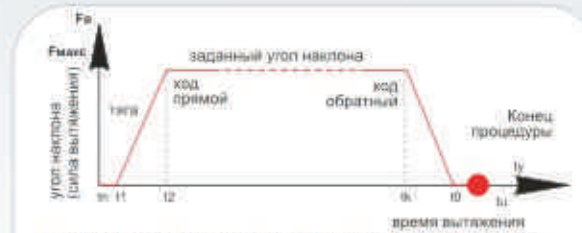

- Диаграмма проведения физиологичного вытяжения позвоночника за счет изменения угла наклона кушетки, под действием веса тела пациента



Ролики-массажеры.

Роликовый массаж позвоночника позволяет достичь релаксации за 3-5 минут процедуры.

ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- БЕЗОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ путем вправления грыжевого выпячивания и снижения (декомпрессии) внутридискового давления
- лечение ОСТЕОХОНДРОЗОВ, других дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника
- лечение ПРОТРУЗИЙ межпозвонковых дисков;
- лечение ИСКРИВЛЕНИЙ позвоночника, сколиоза.

NEW

Регулировка уровня роликов с пульта управления! Вибрация воздействует локально на околопозвоночную зону, увеличена амплитуда колебаний вибрации и глубина массажа.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



С помощью кнопки «ПАУЗА» возможно проведение вытяжения без роликового массажа.